

PROFESSION AND QUALITY
用专业和品质加速科研

CHEM^N 科幕仪器

☎ 400-8855-630 ☎ 0551-62921227 ☎ 800008624

安徽科幕仪器有限公司
安徽省合肥市经开区双龙路与望客路交口

苏州工业园区科幕仪器科技有限公司
苏州工业园仁爱路166号中国科学技术大学苏州研究院



官方公众号

MSG快开式机械 搅拌反应釜使用说明书

目录 CONTENTS

前言		第五章、MSG一体式控制器使用说明	14
第一章、主体结构材料介绍	03	5.1、产品图片	14
第二章、使用前的准备	06	5.2、触控屏操作	14
2.1、检查反应釜主体和其他附件	06	第六章、注意事项	20
2.2、安装科睿专利助力板	06	第七章、常见故障及故障排除	21
2.3、连接电气线路	07	7.1、高压釜类常见故障及故障排除	21
第三章、反应釜进行高温高压充气反应实验的步骤	08	7.2、一体式控制器常见故障及故障排除	22
3.1、液体、固体物料以及磁力搅拌子的加入	08	产品保修卡	23
3.2、反应釜的紧固	08		
3.3、高压气体的充注	09		
3.4、反应前的确认	10		
3.5、开启加热, 开始反应	10		
3.6、开启加热, 开始反应	10		
3.7、反应过程中的在线取样	11		
3.8、反应后的拆卸、取料、清洗	12		
第四章、二硫化钼高温润滑脂使用说明	13		

前言 PREFACE

科睿仪器是一家专业从事化学仪器设备的高新技术企业。公司学术带头人为中国科学技术大学博导, 技术团队由博士、硕士和高级工程师组成, 有雄厚的研发力量和丰富的成功案例经验。自2014年成立以来, 公司致力于为广大科研工作者设计, 开发并生产高质量、通用型的中高压反应设备与容器、分子蒸馏设备、催化剂评价装置、成套流体系统等。我们一直致力于满足科研工作者对仪器设备的多样化、个性化需求, 为客户提供优质、国际化的产品和服务。

第一章 主体结构材料介绍

科睿仪器反应釜和压力容器的釜体、釜盖通常由 316L 不锈钢或其他耐腐蚀合金制成。

常用的金属材料包括：

- 不锈钢 316L、904L、2520
- 蒙乃尔 (Monel)400 合金
- 因科乃尔 (Inconel)600 合金
- 哈氏合金 (Hastelloy) B-2
- 哈氏合金 (Hastelloy) C-276
- 工业纯钛 TA2
- 锆合金 702、705
- 其他要求的金属材料

在这些耐腐蚀合金材料中，316L 不锈钢和哈氏合金 C-276 是最受欢迎的选择，科睿对于常用规格的 316L 不锈钢和哈氏合金 C-276 均有充足储备，在满足工况需求的前提下，选择这两种主体结构材料制造的反应釜，能够节省特种金属原材料的订购和质检消耗的时间，缩短您等待设备的周期。

需要注意的是，通常对于科研级反应釜来说，主体结构材料指釜体、釜盖以及其他直接接触液态介质的部分如热电偶套管、搅拌轴、搅拌桨、探底管等。而对于进出气阀门、压力表、接头、卸荷阀、放料阀、磁力耦合器壳体、内磁钢保护罩等，默认采用 316L 不锈钢材质。在用户提出要求时，科睿也能够提供与主体结构材料相同材质的部件和阀门管件，但由于需要向阀门管件制造厂商特殊定制，可能会带来较长的交货周期。

科睿的工程技术团队将尝试解答金属材料在用户指定的实验条件下耐腐蚀性的问题，帮助用户检索相关数据和文献，并建议可能适用的材料，但无法就此种合金将完全抵抗预设的腐蚀性环境作出保证。下面是一些常用金属材料的简介：

316L 不锈钢

316L 不锈钢是最广泛使用的奥氏体耐腐不锈钢，其中 L 代表低碳含量。相对于 304 不锈钢，316L 不锈钢有更高的镍含量，并添加了钼元素，提高了耐酸和抗点蚀性能，适用于轻度腐蚀性环境和大多数有机反应环境。一些有机酸和有机卤化物可以在某些条件下水解形成将会侵蚀 316L 不锈钢的无机卤素酸。316L 不锈钢通常可用在醋酸，甲酸等有机酸环境下，但通常不作为无机强酸系统的首选材料。在环境温度下，316L 不锈钢确实对稀硫酸，亚硫酸，磷酸和硝酸具有抵抗能力，但是硫酸，磷酸和硝酸容易在高温高压下侵蚀 316L 不锈钢。卤素酸即使在低温、稀溶液中也能快速攻击所有形式的不锈钢，因此应当避免在 316L 不锈钢制成的反应釜内进行含有卤素酸的反应。虽然 316L 不锈钢对氢氧化钠等强碱具有出色的抗腐蚀性能，但需要注意的是，强碱会导致不锈钢压力容器产生应力腐蚀开裂，这种现象在高于 100°C 的温度下开始出现，并且是不锈钢实验室容器中最常见的腐蚀形式之一。

316L 不锈钢在氨和大多数氯化物环境里有很好的耐腐蚀性。卤素离子可以使所有不锈钢产生严重的点蚀。氯化物可引起应力腐蚀开裂。但许多其他盐溶液可以在不锈钢容器中处理，特别是中性或碱性盐。在适中的温度和压力下，316L 不锈钢可与大多数商用气体一起使用。在严格的无水系统中，即使氯化氢，氟化氢和氯气也可用 316L 不锈钢容器盛装。

哈氏合金 (Hastelloy) C-276

哈氏合金 C-276 是美国哈氏合金国际公司 (Hastelloy International) 推出的一种镍基合金，添加有铬、钼、钨等元素。相比于 316L 不锈钢，它在高温下的强度和硬度都更优，同时具有良好的加工性和焊接性。在科睿反应釜常用的合金中，它具有最广泛和均衡的耐腐蚀表现，对化学实验室常见试剂都有良好的抗腐蚀性能。主要耐湿氯、各种氧化性氯化物、氯化盐溶液、三价铁溶液、硫酸与氧化性盐，在低温与中温盐酸中均有很好的耐蚀性能。因此，近三十年以来、在苛刻的腐蚀环境中，如化工、石油化工、烟气脱硫、纸浆和造纸、环保等工业领域有着相当广泛的应用。哈氏合金 C-276 的各种腐蚀数据是有其典型性的，但是不能用作规范，尤其是在不明环境中，必须要经过试验才可以选材。哈氏 C-276 合金中没有足够的 Cr 来耐强氧化性环境的腐蚀，如热的浓硝酸。由于其广泛的化学耐性和良好的机械性能，非常适应实验室研究工作试剂和介质复杂多变的特点，因此哈氏合金 C-276 是科睿反应釜的第二大常用合金，仅次于 316L 不锈钢，用于制作实验室研发使用的各种反应釜和压力容器等。

蒙乃尔 (Monel) 400 合金

蒙乃尔 (Monel) 400 合金是由大约三分之二的镍和三分之一的铜组成的合金。它是氟利昂，氢氟酸和氢氟酸系统的优良材料。对于许多应用，它提供与镍相同的耐腐蚀性，但具有较高的最大工作压力和温度，并且由于其大大改善的机械加工性而成本降低。蒙乃尔 400 合金广泛用于苛性碱溶液，因为它在大多数应用中不会受到应力腐蚀而开裂。氯化物盐不会在合金 400 中引起应力腐蚀开裂。蒙乃尔 400 合金在适度的温度和浓度下对一些对盐酸和硫酸的有抵抗能力，但一般不作为耐这些酸的首选材料。由于铜含量高，蒙乃尔 400 合金受到硝酸和氨系统的快速攻击。

哈氏合金 (Hastelloy) B-2

哈氏合金 B-2 是一种镍、钼含量较高的合金，在各种还原性介质中具有优良的耐腐蚀性能，主要用于酸性环境，特别是含有盐酸，硫酸和磷酸的环境。它对这些纯酸的抗性是无与伦比的，但低至 50ppm 的铁离子和其他氧化离子的存在可以显著降低它的抗性。哈氏合金 B-2 能耐常压下任何温度，任何浓度盐酸的腐蚀。在不充氧气的中等浓度硫酸、各种浓度磷酸、高温醋酸、甲酸等有机酸、溴酸以及氯化氢气体中均有优良的耐蚀性能，同时，它也耐卤族催化剂的腐蚀。因此，哈氏合金 B-2 通常应用于多种苛刻的石油、化工过程，如盐酸的蒸馏、浓缩；乙苯的烷基化和低压羧基合成醋酸等生产工艺过程中。

因科乃尔 (Inconel) 600 合金

因科乃尔 600 合金是一种 Ni-Cr 合金，可以使用在从低温到 1093°C 的温度范围内。因

科乃尔 I600 合金没有磁性,焊接性能良好。因科乃尔 600 合金可以使用在广泛的腐蚀环境下,高镍含量让因科乃尔 600 合金对还原性环境有一定的耐蚀性能,对氯离子应力腐蚀断裂有优异的耐蚀性能,同时铬的加入让因科乃尔 600 合金对弱氧化性环境有一定的耐蚀性能。从某种意义上讲,因科乃尔 600 合金已经是工业纯镍的替代品。但在诸如热的浓硝酸等强氧化性溶液中,因科乃尔 600 合金的耐蚀性能比较差。因科乃尔 600 合金在中性和碱性的盐溶液中以及在苛性碱环境中不会有腐蚀情况发生。因科乃尔 600 合金对蒸汽、空气、碳的氧化物的混合气体有抵抗力,耐渗碳,能够用于高温空气氧化和,但在含硫的高温气体环境中则会发生腐蚀。在中等高温时对无水的氯气和氯化氢气体有良好的抵抗力,但容易受到潮湿的、溴的腐蚀。因科乃尔 600 合金在碱液浓缩过程中能耐热应力腐蚀。

工业纯钛 TA2

钛合金 TA2 是最常用的工业纯钛牌号,因其耐蚀性能和综合力学性能适中。它含有氧、氮、碳及多种其他杂质元素,实质上是一种低合金含量的钛合金。与化学纯钛相比,由于含有较多的杂质元素,其强度大大提高,力学性能和化学性能与不锈钢相似。

钛是具有强烈钝化倾向的金属,在空气中和氧化性或中性水溶液中能迅速生成一层稳定的氧化性保护膜,即使因为某些原因膜遭破坏,也能迅速自动恢复。因此钛在氧化性、中性介质中具有优异的耐腐蚀性。钛对氯离子也有很强的耐性。如果存在相对少量的氧化离子,例如铜离子、铁离子甚至硝酸作为腐蚀抑制剂,可以使得钛在高纯度的强酸如硫酸和盐酸中的腐蚀速率降低到可接受的水平。

值得注意的是,钛会与氢气反应,吸收氢气,造成氢脆现象,破坏反应釜的强度。在较高温度下(大于 80°C),吸氢会变得明显。当温度超过 300°C,钛与氢反应速度急剧加快,生成大量氢化物而使钛发生明显的氢脆。因此,需要尽量避免在高温纯氢气氛中使用钛制设备。

锆合金 702

锆是活性金属,很容易产生氧化反应,在室温下就能和空气里的氧反应形成一层氧化物保护膜,这种表面生成的钝化膜十分致密,使得锆具有很强的防腐能力,一定条件下对大多数有机酸、无机酸、强碱、熔融盐等具有比高级不锈钢、钛合金、镍基合金更优异的耐蚀性能。

锆合金 702 是工业上最常用的锆合金牌号,它具有优良的耐盐酸和硫酸的能力。锆在纯盐酸中的耐腐蚀性高于任何工程金属,向盐酸中通入空气不会影响耐蚀性能,然而氧化离子如三价铁,二价铜的掺入将大大降低锆的耐腐蚀性。锆在浓度低于 90%,温度低于 200°C 的硝酸环境中显示出极强的耐腐蚀性,其他金属只有铂能够提供相近的耐硝酸腐蚀性能,然而氟离子能够大大降低锆的耐硝酸腐蚀性能。锆对于氢氟酸没有抗腐蚀性,很低浓度的 HF 也能够侵蚀锆合金。锆能够耐受任何碱液的腐蚀,甚至是沸腾或熔融的碱,这点明显不同于其他耐腐蚀材料,如钽、玻璃、石墨和聚四氟乙烯,它们均能够被强碱侵蚀,而锆不会。锆在超过 300°C 后强度迅速下降,因此科睿反应釜使用锆材质的最高设计温度为 300°C。

尊敬的科研工作者:

您好!感谢您选择科睿品牌反应釜,我们相信它将在您的科研实验过程中给您带来更加“安全、便捷、精确、高效”的使用体验。由于反应釜属于特种设备,经常会在高温、高压条件下操作,不正确的使用可能会造成严重事故甚至人身伤亡。为了实验安全,也为了更好的让科睿反应釜为您服务,在使用前请您务必仔细阅读本使用说明书,并严格按照说明书的操作步骤和注意事项使用反应釜。

第二章 使用前的准备

2.1、检查反应釜主体和其他附件

科睿仪器反应釜采用专用标准化包装,能够在运输过程中最大限度的保护反应釜,避免反应釜在运输过程中受到损坏,然而受限于物流运输过程属于第三方运送,为了确保安全,请您在拆箱后仔细检查釜上各接头、螺栓是否存在弯折、撞伤、破损等情况,以及各附件、控制器是否完好无损。如有任何异常,请不要使用反应釜,并立即与科睿售后团队联系。


2.2、安装科睿专利助力板

反应釜是高压设备,为了实现可靠密封,需要将主螺栓拧紧到合适的扭矩。为了使您能够更轻松便捷的完成拆装反应釜的操作,科睿仪器为每台反应釜配备了专利设计的拆装助力底座板(以下简称助力板)。助力板是一块不锈钢板,上面开有一个与反应釜底部契合的直边圆孔,和四个用于固定的小孔。

安装助力板的方法:

(1) 自攻螺钉固定(木质实验台):

使用随助力板附赠的四颗自攻螺钉,用十字螺丝刀将自攻螺钉旋入实验台板内,将助力板固定在台上即可。

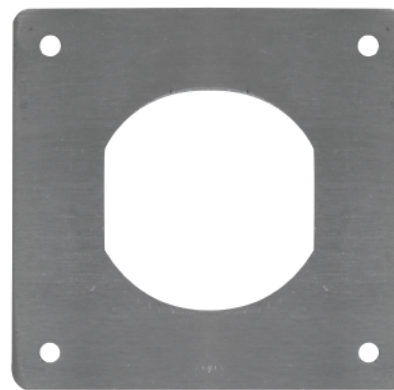

(2) G字夹固定（硬质理化板实验台）：

由于理化板实验台材质硬，且容易开裂，不宜用自攻螺钉，用2个G字夹将助力板固定在试验台边角位置，此结构方便拆卸，更换位置。



3、连接电气线路

科睿仪器 MSG 系列微型高压反应釜配有一体式加热、搅拌及智能程序控温系统，实现精确、方便的温度控制及操作，MSG 系列反应釜内部物料的搅拌是通过电机传动磁力耦合装置驱动釜内搅拌桨的转动实现的，具有搅拌力矩大、转速精确可调、性价比高的优点。在进行实验之前，需要按照以下步骤和图示，正确地连接反应釜的电气线路。



- (1) 电源：将标准电源线插头插入背部的电源接口，将电源线的另一端插到220V电源插座上。
- (2) 热电偶接口：热电偶线一端接入该接口，另一端直接连接热电偶。
- (3) 电机接口：电机线一端接入该接口，另一端连接电机。
- (4) 电源开关：再打开电源开关，即可对显示屏进行操作。

第三章 反应釜进行高温高压充气反应实验的步骤

3.1、液体、固体物料的加入

将需要进行反应的液体、固体物料投入反应釜内。

注：反应釜内液面高度至少需要没过热电偶（或热电偶套管）最底部3mm以上，液面最高不得超过反应釜的3/4体积。推荐液面高度范围是反应釜体积的1/3-2/3。



3.2、反应釜的紧固

科睿仪器 MSG 系列反应釜采用双卡钳快开式紧固结构，釜体上没有任何螺栓结构，方便投料和取料操作，同时使得紧固和拆卸反应釜过程需要拧紧的圈数最小化。固、液物料投料完毕后，如下图所示将釜盖与釜体盖合，将卡钳对向卡在釜体和釜盖的凸缘上，将保护环套在卡钳外，注意使滚花螺栓对准卡钳侧面的凹孔并拧紧，将滚花手柄安装在卡钳套上。将反应釜整体放置在助力板上，使釜体下方嵌入助力板的孔内。



先将卡钳上的六支主螺栓依次手动拧紧（六个螺栓的顺序为 1、2、3、4、5、6），再用配套的扳手，按照 1、4、2、5、3、6 的对角顺序，逐次对角方式，每次拧紧 1/4 圈 -1/3 圈左右，均匀的拧紧，最后用相同的力量按照顺序（1、2、3、4、5、6）检查一遍是否有螺栓没有拧到位，其中要是螺栓在相同力量的情况下能拧动的话，需要再重新拧紧一遍，确保 6 个螺栓用相同的力量都无法拧动即可。



注意：在第一次紧固螺栓时，切勿将某个螺栓过度用力拧紧，以防釜体与釜盖端面不平行，密封圈压紧不均，造成密封失效。

3.3、高压气体的充注

科睿仪器 MSG 系列反应釜配有充、放气针型阀，能够方便地进行加氢、氧化反应和惰气保护反应。在确认反应釜充分紧固后，方可进行高压气体的充注操作。如不需充注气体，可跳过此步骤。

首先用手顺时针轻轻拧动反应釜的充、放气阀门的手柄，确认均处于关闭状态。将配套的高压充气软管一端接钢瓶减压阀，另一端为快速接头，接反应釜的充气口，注意此操作需用两把扳手分别钳住反应釜的充气接头和快速接头，切勿只用一把扳手拧紧快速接头（见下图）。调节钢瓶减压阀到 0.2-0.5MPa 左右，逆时针缓缓拧动充气阀的手柄，向釜内充入气体。待釜上的压力表示数稳定后，关闭充气阀，缓缓打开放气阀，将气体排出。重复 2-3 次后，即完成釜内气体置换。再顺时针调节钢瓶减压阀到所需充入的气压，缓缓打开充气阀，待釜上的压力表示数稳定后，关闭充气阀，关闭钢瓶阀，将减压阀调至最松状态，用两把扳手拆卸快速接头。



注意事项：

- (1) 此步骤需在通风橱内进行，或将气体从反应釜放气阀用管路引到安全位置，防止易燃易爆或有毒有害气体的释放造成危险。
- (2) 当需要在反应釜内充入多种气体时，需合理安排充注顺序，原则上优先充注比例小的气体，并在充注下一种气体前，调节钢瓶减压阀使进气压力高于釜内压力，防止釜内气体倒流。
- (3) 如充气后发现反应釜任何地方有泄漏情况，必须将釜内压力完全释放后再进行紧固或其他处理，严禁在带压状态下紧固或拆卸主螺栓和各接头！

3.4、反应前的确认

在开启加热，进行反应之前，必须再次确认操作无误。首先确认反应工况不会超过反应釜的最高温度和最高使用压力。其次，确认反应釜的充气、放气阀门处于关闭状态（特别对于不需充注气体的反应实验，忘记关闭阀门会导致冲料、干烧等事故）。将反应釜置于加热炉上，确认热电偶插头已插好。（此步骤非常重要！如未将热电偶插好就开启加热将导致严重事故！）

3.5、接通冷却水

科睿仪器 MSG 系列机械搅拌高压釜采用磁力耦合传动的形式，通过内外磁钢的耦合磁力将搅拌力矩传递给釜内的搅拌轴，实现了全静密封，保证高温高压下的密封可靠性。为了防止高温下釜内的热量向上传导，损坏磁力耦合器内部的轴承、密封件以及导致磁钢消磁，在进行温度超过 120°C 的反应时，必须为磁力耦合搅拌机提供持续的冷却水。在开启加热前，将冷却水用软管通入磁力耦合器的进水口，并从出水口排出。对于 25-500mL 规格的科睿 MSG 系列机械搅拌高压釜，其冷却水最低流量为 10L/min。

3.6、开启加热，开始反应

按照后章节中“MSG 一体式控制器操作说明”的方法即可进行程序升温及搅拌设置。

注意事项：

- (1) 切勿开启自动加热后就立即离开实验现场!至少需观察 30 分钟以上, 确认升温平稳、压力正常, 反应釜无任何异常情况。
- (2) 反应过程中, 需要定时监控反应状况, 如果发生温度或压力超过反应釜允许上限, 或发生冲料、泄漏、安全装置(爆破片、安全阀等)动作等情况, 需立即切断电源, 撤离到安全位置, 等反应釜冷却至室温后, 再视情况处理, 或联系科幕售后技术团队维修。

3.7、反应过程中的在线取样 (仅适用于装有科幕仪器平衡回流取样阀组的反应釜)

为了在反应过程中实时监控反应进程或研究反应动力学特性, 经常需要在反应过程中对反应混合物进行取样分析。科幕反应釜申请的专利平衡回流取样阀组, 可实现在线取样实验操作。具体使用步骤如下:

- a) 进行实验前, 确认平衡回流取样阀组(取样三通球阀 V1、针阀 V2)均处于关闭状态。
- b) 实验过程中需要取样时, 将三通球阀 V1 的手柄旋转到“取样”档 3 秒后旋回关闭位置。此时三通球阀 V1 和针阀 V2 之间的管路体积由于反应釜内压力的作用, 充满了一定体积的液体。
- c) 缓缓打开针阀 V2, 从针阀出口处收集液体样品。
- d) 关闭针阀 V2, 将三通球阀 V1 的手柄旋转到“回流”档, 此时管路内呈现连通的环路, 管路内残留的液体在重力的作用下, 回流到釜内继续参与反应。大约 10 秒后将 V1 旋回关闭位置, 以备下一次取样。



3.8、反应后的拆卸、取料、清洗

反应结束后, 待反应釜冷却至室温后, 缓缓开启放气阀, 将釜内压力完全卸除。将反应釜底部卡入助力板, 拧松主螺栓, 拆卸卡钳, 打开釜盖, 将釜内物料倒出或用吸管吸出。及时将反应釜的釜体、釜盖进行清洗并晾干备用, 用干净的软布或类似材料把主密封面擦拭干净, 切勿将主密封面划伤。

注意事项：

- (1) 科幕仪器 316L 不锈钢、哈氏合金材质反应釜允许在不高于 300°C 的温度下急冷, 如需要在反应结束后迅速冷却猝灭反应, 可戴隔热手套将釜从加热炉内取出, 置于盛水的金属盆内急速冷却, 但请注意在此过程中务必小心操作, 谨防烫伤。此外, 在此过程中, 请务必保持磁力耦合器的冷却水处于持续通入状态。
- (2) 釜体可置于烘箱内干燥, 釜盖如需烘干, 温度不得高于 45°C, 防止损坏压力表的聚碳酸酯表盘。

* 手套箱中的操作

科幕仪器 MS 系列反应釜结构紧凑, 非常适合手套箱操作, 实现无水无氧反应。通过过渡仓将反应釜送入手套箱内, 完成加料后, 在箱内用扳手初步拧紧主螺栓, 并确认进出气阀门处于关闭状态。由于科幕反应釜独特的密封结构, 此时反应釜内部能够保证良好的气密性, 取出后空气中的氧气和水蒸气不会进入釜内。将釜通过过渡仓取出后放置于助力板上, 按照步骤 2 (P3- 反应釜的紧固) 再次拧紧, 即可进行反应。

科幕仪器反应釜配套的机械式压力表能够耐受真空环境, 无需担心过渡仓内真空置换过程对压力表的影响。

第四章 二硫化钼高温润滑脂使用说明

1、性能特征

- 1.1、二硫化钼高温润滑脂具有优异的抗磨损性能，粘性强，润滑降噪效果良好；
- 1.2、极佳的高温性，在高温下具有长久的使用期和稳定性，高温下不滴油，不结焦；
- 1.3、优良的抗燃、抗氧化稳定性，极低的挥发损失；良好的抗水性，在接触水工况下，不流失，不乳化。

适用范围：科睿仪器水热釜、高压釜顶丝。


温度使用范围：-40℃—550℃。

2、具体操作

- 2.1、工具：宽度为 7mm 的毛刷（如下图所示）；



- 2.2、用毛刷沾取少量润滑脂涂在顶丝的螺纹处，具体涂抹方法：将毛刷底部贴合顶丝的第一道螺纹，从左至右横向涂抹 1/4 圈即可；

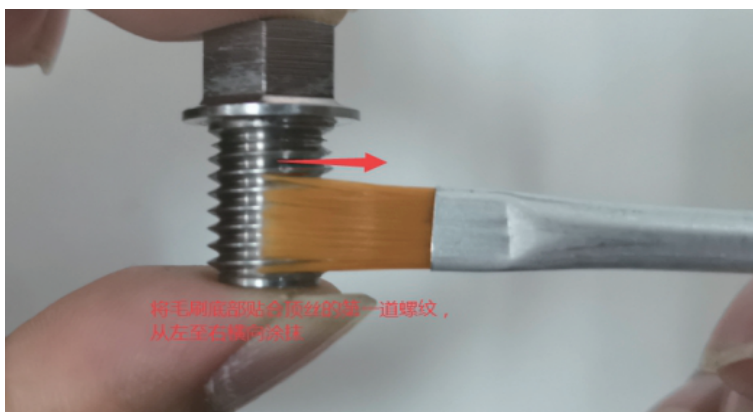

- 2.3、将顶丝旋进卡钳中，使润滑脂能充分填充螺纹连接处。

3、注意事项：

- 3.1、若更换新的顶丝或螺栓，需重新涂抹；
- 3.2、涂抹润滑脂后，旋紧螺丝时，若发现螺纹有卡顿，请及时联系科睿仪器售后人员，避免强行拧紧顶丝，导致螺纹咬死现象发生；
- 3.3、润滑脂应避免与皮肤长期接触，使用时应做好防护措施。

第五章 MSG一体式控制器使用说明

5.1、产品图片



5.2、触控屏操作



(1) 打开电源开关，设备屏幕点亮，进入登录界面。

输入登录密码 123456（可修改），点击 Enter 确认，再点击登录，进入主界面。忘记密码（初始密码是 123456），点击忘记密码会进入密码修改界面。

注：设备初开机时，需要几秒后方可操作。

(2) 主界面



编号介绍：

- 1、显示实时温度，取整数值。
- 2、设定温度为程序段中设定的温度，跟随程序段变化而变化；实时温度为设备热电偶测试点温度。
- 3、程序阶段显示温控程序处于哪一阶段，运行了多长时间。
- 4、点击一下程序运行按钮，按钮右移，加热指示灯点亮；设备进入加热温控状态。
- 5、程序设置：点击一下，进入程序设置界面，设置程序段。
- 6、参数设置：点击一下，进入参数设置界面，设置内部参数。
- 7、升温曲线：点击一下，进入升温曲线界面，观测 PV,SV 值变化。
- 8、数据读取：点击一下，进入数据读取界面，查看历史数据，可导出数据。
- 9、点击进入公司地址、联系方式界面。
- 10、分别显示设定转速和实际转速，表盘会随实际转速变化而变化，调节范围是 50-1400r/min。
- 11、电机旋转启停按钮。
- 12、熄屏时间、亮度调节界面。

注：1、实时温度显示 1380，表示热电偶没接或者故障。

2、运行时间的计数基数为 1.6min。

(3) 程序设置界面



读取：读取设备里面上次存储的程序数据。

编辑：当设置好参数后，点击编辑 - 确定应用，将数据下载至设备内部。

例：设定一段温控程序，40min 升到 200°C，200 摄氏度恒温 30min，20min 降温到 100°C后停止。

温度设定值 1	0	40
温度设定值 2	200	30
温度设定值 3	200	20
温度设定值 4	100	0/-121.0

设置完以后，点击编辑，弹出小窗口，点击确定应用后，程序设置完成。

(4) 参数设置界面



读取：读取设备里面上次存储的参数数据。

编辑：设置好参数后，点击编辑，弹出密码对话框，输入密码：888888，然后点击“确定应用”，将数据下载至设备内部。

自整定：点击“▶”，仪表开始自整定，并且“●”点亮。

点击“⏸”，仪表停止自整定，并且“●”熄灭。

注：自整定试用范围是在加热存在非温，或者温度偏差比较大的情况下适用。

自整定方法：

1、将程序第一段设置为目标温度的百分之 60，第一段时间设置为 120 分钟（非固定时间，自整定完成后自动停止），第二段温度设置与第一段相同，后面可以不设置。

(2) 点击自整定按钮“▶”，自整定指示灯“●”点亮。

(3) 点击加热运行按钮，设备开始自整定。

(4) 自整定结束后，PID 参数会发生变化，自整定指示灯“●”熄灭。


点击读取时，会出现弹窗界面。

(5) 屏保时间设置



待机时间设置：10-65535 秒；激活亮度：0-255；待机亮度：0-255。

(6) 升温曲线界面

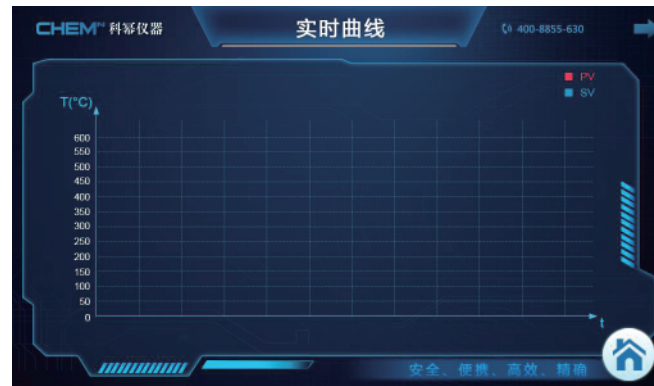

1、显示仪表当前和设定升温曲线，红色线为当前实际温度，蓝色线为当前设定温度。

2、点击右上角箭头，会进入历史曲线界面。


3、点击右下角返回按钮，会进入主界面。



- 1、显示仪表当前和设定升温曲线，红色线为当前实际温度，蓝色线为当前设定温度。
- 2、点击右上角箭头，会返回实时曲线界面。
- 3、点击右下角返回按钮，会进入主界面。


(7) 数据读取界面



- 1、导出数据：当插入U盘后，可导出数据。数据导出格式为EXCEL表格。
 - 2、屏幕上下拖拽，可以查看历史数据，约2-3分钟记录一次数据。
- 注：1、“”标识，表示返回主界面。
- 2、当数据导出时会弹出小窗口，显示数据导出成功。

(8) 公司地址、联系方式界面



点击“”，界面返回主界面。

第六章 注意事项

- 1、严禁在反应釜处于高温或带压状态下紧固或拆卸任何螺栓、接头。
- 2、反应釜的加热元件通常为镶嵌式弹簧加热圈，加热速率一般推荐设置为5°C/min，最高不超15°C/min。经常快速升温会缩短加热炉的使用寿命，也更容易发生飞温现象。
- 3、反应结束后应及时取出物料，并将反应釜清洗干净，防止残留的物料长时间与釜体材料接触造成腐蚀。密封面严禁用钢丝刷等硬物清洁，避免划伤磕碰。反应釜应保存在干燥、无腐蚀性气体的环境中。
- 4、科幕反应釜的进出气阀门采用V型阀杆精密针阀，阀芯带有特殊涂层，拧紧时切勿用力过度，只需用手轻轻带紧即可实现密封，过度用力会大大缩短阀门的使用寿命，并可能导致后期阀门发生内漏现象。

第七章 常见故障及故障排除

1、高压釜类常见故障及故障

故障现象	故障原因	排除方法
压力表指针不归零	使用压力超出压力表可承受最大量程, 压力表指针被损坏, 不归零	返厂更换压力表 (非人为原因导致, 保内免费更换)
进排气阀漏气	客户使用物料对阀芯有腐蚀 阀芯进入固体物料, 导致阀门无法拧紧	拆卸并清洗阀门, 组装后做气密性测试
	阀门在长期使用过程中, 密封区域磨损	更换阀门
安全阀漏气	安全阀内部 O 型圈损坏	拆卸安全阀更换 O 型圈
热电偶损坏, 无法正常测温	客户处物料对热电偶有腐蚀性、热电偶本身质量问题	更换热电偶
磁力耦合机械搅拌 高压釜搅拌异响	陶瓷轴承损坏	更换内部陶瓷轴承
搅拌装置漏气	O 型圈损坏	更换 O 型圈
釜体与釜盖难以配合	密封面损坏	返厂维修
釜体与釜盖难以打开	密封面或密封圈损坏	返厂维修
卡钳难以安装或拆卸	卡钳垫片损坏, 卡钳螺纹损坏	更换卡钳垫片, 修复卡钳螺纹
控温仪在使用过程中 存在飞温现象	程序设置出现问题	重新设置程序
	未对控温仪进行自整定, 控温精度较低	控温仪自整定或更改 P/I/D 参数
加热炉损坏无法正常使用、 加热过程中存在温度 升不上去现象	加热炉内部线路损坏	检查线路
	高温下长时间使用导致 加热圈损坏, 加热功率发生变化	更换加热圈
高压釜不保压 存在漏气现象	运输途中碰撞 导致部件松动	打包过程中对压力表、 进排气阀、安全阀等 重要部件应重点防护
	高压釜使用一段时间后因 生胶带、垫片老化、卡套、 螺纹松动导致漏气	更换老化生胶带、垫片 并紧固卡套、螺纹
控制仪表显示 “orAl”	热电偶损坏、接触不良 或热电偶未连接	检查接线是否连接稳固, 热电偶损坏请速与本公司联系

2、一体式控制器常见故障及故障排除

故障现象	故障原因	排除方法
打开总开关, 总开关指示灯 不显示, 触控屏不显示	电源未接通	查看电源总线是否连接完成, 后部空开是否打开; 如上述 操作均不能解决此类问题, 请跟售后工程师沟通
	后部空开未接通	
	内部线路损坏	
打开设备以后 设备显示超温报警	热电偶未连接	查看热电偶线连接是否正常; 更换热电偶进行测试; 查看内部报警参数设置是否正确
	热电偶损坏	
	内部上限报警参数不正确	
打开设备后, 转速调节异常	设定转速参数, 电机不转动	查看设备型号, 确定电机属于 外置电机还是内置电机, 接线 是否牢靠; 转速达不到指定转 速是否是因为溶液太粘稠, 查 看空载运行是否正常
	转速达不到指定转速	
设备接通, 墙上 漏电保护器跳闸	设定转速参数, 电机不转动	查看设备型号, 确定电机属于 外置电机还是内置电机, 接线 是否牢靠; 转速达不到指定转 速是否是因为溶液太粘稠, 查 看空载运行是否正常
	转速达不到指定转速	
设备接通, 墙上 漏电保护器跳闸	漏电保护器太过灵敏, 启动 加热炉电流波动大	更换实验室漏电保护器, 更改为空开; 查看 实验室接地情况
	接地措施不良	
打开设备, 设备不加热	设备处于报警状态	查看设备参数, 观察是否报警; 是否处于自整定状态; 参数设 置、程序设置是否正常; 均无问 题, 需与售后工程师沟通
	设备处于自整定状态	
	内部线路损坏	
设置参数时, 出现设置 后未变化, 写入错误	内部元器件有损坏	与售后工程师直接沟通

产品保修卡

产品型号: _____ 出厂日期: _____

保修说明:

产品主体质保期为3年,包括:釜体、釜盖、机械搅拌总成(含电机)、卡钳、卡钳套及手柄、转接头、加热炉外筒、科幂控温仪;易损件质保期为1年,包括:螺栓、热电偶及热电偶套管、针阀、球阀、接头、压力表、安全阀、爆破阀、压力传感器、加热线圈、磁力搅拌器、搅拌桨等配件;其他易耗品质质保期为3个月,包括:密封件、磁子;内衬不予保修(注:以上未提及配件,质保期均为一年)。

1、客户处配件及工具丢失,不予补发;

2、质保期内,出现质量问题,免费维修;

3、免费年检项目:

(1) 主体结构:釜体、釜盖、热电偶套管外观及腐蚀程度目检;卡钳、主螺栓目检;焊缝(如有)目检;

(2) 压力试验:水压试验,气密性试验(氮气),安全阀动作压力检验和标定;压力表校核;

(3) 润滑清洗:针型阀的调整和润滑,螺栓除锈润滑,外观清洗,内壁抛光;

4、下列情形为有偿维修:

①不能提供本保修卡或有效购买凭证;

②错误使用、超出产品使用范围、违规操作以及其他人为因素导致的损坏;

③超过产品质保期限。

5、人为因素导致的损坏或超过产品质保期限返厂维修的产品,应收取产品更换费用、维修费、人工费。

6、质保期内返修来回运费由科幂承担,超出质保范围返修运费由双方各自承担。

维修记录

维修日期	故障描述	完成日期	备注

CHEM^N 科幂仪器
用专业和品质加速科研